

de quatre rouleaux et d'une zone centrale d'aspiration. Comme ces éléments sont contrôlés électroniquement, le système d'action 3-en-1 permet un massage fluide et continu.

► 1. Palper


Le premier rouleau, doux au toucher et muni de stries surélevées, soulève délicatement la peau pour la guider vers la zone d'aspiration.

► 2. Aspirer

Le vide soulève davantage la peau jusqu'à former un pli, le massage pouvant ainsi atteindre la couche de cellulite de manière efficace.


► 3. Rouler

L'action simultanée des quatre rouleaux permet un massage agréable et en profondeur en agissant sur la cause principale de la couche de cellulite - l'excès de fluide autour des cellules graisseuses. Les rouleaux arrière remettent ensuite délicatement la peau en place.

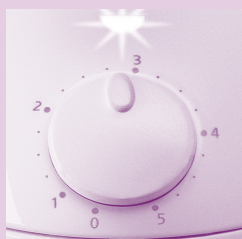


► Contrôle par capteur et voyant lumineux

Pour rendre le soin aussi efficace que possible, le système Vacumotion ne se met en marche que si le Cellesse Vitesse est en contact approprié avec la peau. Un capteur spécial "détecte" que le contact entre la peau et l'appareil est établi et un petit témoin lumineux s'allume sur le devant. De cette façon vous pouvez être sûre d'utiliser correctement le Cellesse Vitesse.

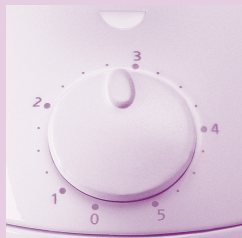

► Réglages d'intensité

Vous pouvez déterminer vous-même l'intensité de votre massage, en utilisant la commande à variation multiple. Rappelez-vous que le massage doit toujours être agréable. S'il vous arrive de trouver l'opération douloureuse, réduisez l'intensité à un niveau agréable.

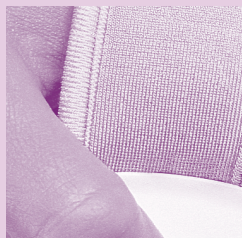

► Vacu-stop

Le Vacu-stop est un moyen simple et sûr pour interrompre ou arrêter le traitement à tout moment. Appuyez sur le bouton Vacu-stop et le mouvement d'aspiration va s'arrêter. Vous pouvez alors retirer sans effort l'appareil de votre peau.

Suivre un programme de soin efficace pour obtenir de meilleurs résultats

Nous vous recommandons d'utiliser Cellesse Vitesse trois fois par semaine, en passant à chaque fois 7,5 minutes sur chaque jambe. Les résultats diffèrent bien évidemment d'une personne à l'autre, suivant le stade de développement initial de la cellulite et en fonction de votre mode de vie personnel.

N'arrêtez pas le soin! Si vous le faites, le développement de la cellulite se poursuivra, du fait de la tendance naturelle du corps à retenir les fluides. Nous vous recommandons d'utiliser l'appareil trois fois par semaine au cours des deux ou trois premiers mois. Passé ce délai, vous

pouvez réduire cette cadence à un programme d'entretien consistant en une utilisation hebdomadaire de 15 minutes; ou de 5 minutes trois fois par semaine. Cela est, en général, suffisant pour vous aider à contrôler la rétention de fluides.

Des tests cliniques le prouvent

Bien que les conséquences indésirables de la cellulite soient visibles en surface, ses causes résident en profondeur sous la peau. Des experts indépendants de l'Université de Bruxelles ont effectué deux types d'essais cliniques sur l'efficacité du système Vacumotion™ 3-en-1.

- ▶ Les tests cliniques effectués par échographie au sein de l'université de Bruxelles montrent que l'utilisation de Cellesse pendant un mois (3 fois par semaine, 7,5 minutes par jambe) favorise un aplanissement de la couche sous-cutanée (interface deme-hypoderme) pouvant aller jusqu'à 49%*.
- * mesure obtenue sur des femmes à un stade cellulitique précoce.

Ces essais ont recours à l'échographie afin de mesurer le degré d'irrégularité de la couche sous-cutanée.

On a comparé les résultats obtenus par des femmes utilisant Cellesse Vitesse avec ceux d'un groupe témoin ne l'utilisant pas.

Une peau plus lisse

Des essais approfondis, effectués par l'Université de Bruxelles, ont employé une technique connue sous le nom topographie de projection. Cette technique fait appel à un ordinateur qui visualise la surface de la peau et mesure l'amélioration de l'aspect capitonné de la peau.

A LIRE AVEC ATTENTION AVANT D'UTILISER LE CELLESSE VITESSE

N'utilisez pas Cellesse Vitesse sur une peau hypersensible, peau à problèmes ou sur des régions du corps présentant des plaies, des irritations, des varices, des cicatrices, des boutons et des blessures. Consultez votre médecin avant d'utiliser Cellesse Vitesse si vous êtes enceinte ou si vous présentez des problèmes cardiaques, de diabète ou de circulation sanguine.

N'utilisez l'appareil que pour masser l'extérieur de vos cuisses, de vos hanches et de vos fesses.



Effets secondaires pendant et après utilisation

Après l'utilisation de Cellesse Vitesse, votre peau peut devenir un peu rouge et sembler sèche au toucher. Ne vous inquiétez pas : ces phénomènes résultant du massage sont tout à fait normaux et dus à l'amélioration de la circulation sanguine. Ils disparaîtront rapidement. Au besoin, après l'utilisation de Cellesse Vitesse, vous pouvez appliquer une lotion ou une crème corporelle pour hydrater la peau. Si ces phénomènes ne disparaissent pas dans les 24 heures, ou si vous notez l'apparition d'autres réactions cutanées indésirables, cessez d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin.


Si vous souffrez de contusions au niveau de l'épiderme ou si vous présentez de petits vaisseaux sanguins visibles à la surface de la peau, nous vous conseillons d'être extrêmement prudente lorsque vous utilisez des niveaux d'intensité élevés, en particulier au cours des premières semaines d'utilisation. Si besoin, vous pouvez toujours utiliser le bouton marche/arrêt Vacu-stop pour retirer instantanément l'appareil de la peau.

Pour obtenir les meilleurs résultats, n'utilisez l'appareil qu'en suivant les instructions décrites dans les pages suivantes.


Important

- ▶ Avant la première utilisation, lisez attentivement le chapitre intitulé "A lire avec attention avant d'utiliser Cellesse Vitesse".
- ▶ Cet appareil a été conçu pour un usage strictement privé et n'est pas prévu pour être utilisé à des fins professionnelles.
- ▶ Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur le transformateur correspond bien à la tension du secteur.
- ▶ N'utilisez Cellesse qu'avec le cordon d'alimentation fourni.
- ▶ N'utilisez pas l'appareil sur une peau mouillée.
- ▶ L'appareil a été spécialement conçu pour les cuisses, les hanches et les fesses. N'utilisez pas l'appareil sur le haut des bras, l'intérieur des cuisses, le ventre ou la poitrine.
- ▶ Ne mettez pas l'appareil en contact avec de l'eau.
- ▶ Maintenez l'appareil hors de portée des enfants.
- ▶ Un nettoyage régulier assure les meilleurs résultats et garantit une durée de vie plus longue de l'appareil.
- ▶ Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un cordon d'origine. Adressez-vous à votre revendeur ou à un Centre Service Agréé Philips.


Préparation de Cellesse Vitesse

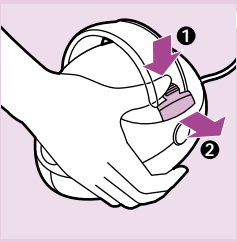


- 1 Vous pouvez régler la sangle à la taille de votre main. Posez votre pouce sur le bouton de réglage situé à l'intérieur de la sangle, et pressez pour libérer le dispositif.

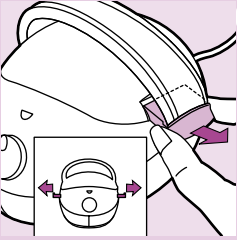

- 2 Tirez la patte à l'extrémité de la sangle et dégagez-en l'axe des deux rainures où il est inséré.

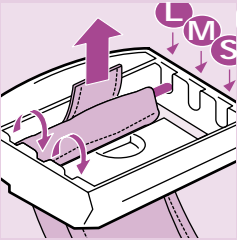


- 3 Insérez l'axe dans un des deux autres rainures. Il y a trois possibilités de réglage : L pour les grandes mains, M pour mains normales et S pour des mains plus petites.

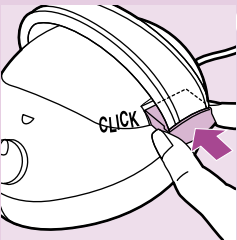

- 4 Glissez de nouveau la patte dans l'appareil jusqu'à entendre un déclic.

Vous pouvez procéder de même avec l'autre extrémité de la sangle pour la serrer ou desserrer. Vous pouvez ainsi choisir la taille de sangle qui convient le mieux à la taille de vos mains.

Mode d'emploi de Cellesse Vitesse

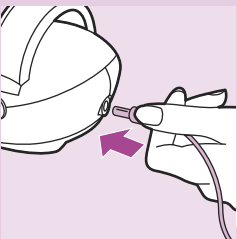


- 1 Assurez-vous que votre peau est propre, sèche et nettoyée de tout corps gras ou de tout autre produit de soin de la peau.

N'appliquez pas de crème ou de lotion sur la peau avant le massage.

- 2 Assurez-vous qu'aucun vêtement ou cheveu ne se prennent entre les rouleaux quand vous utilisez Cellesse Vitesse. Si vous avez des cheveux longs, pensez toujours à les attacher avant de commencer à utiliser l'appareil.


- 3 Branchez la fiche du cordon d'alimentation sur l'appareil.

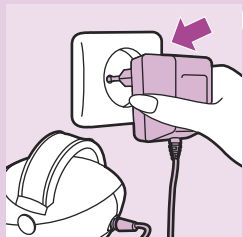

4 Branchez le transformateur dans la prise de courant.

5 Glissez votre main sous la sangle de la poignée et maintenez le Cellesse Vitesse en serrant vos doigts sur la partie arrière de l'appareil (l'extrémité de vos doigts tournée vers le connecteur).


6 Vous pouvez utiliser Cellesse Vitesse en position assise, debout et même couchée.

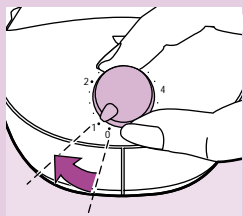

7 Avant de commencer, placez le bouton marche/arrêt sur le réglage désiré.


Un réglage plus fort de l'intensité génère une puissance d'aspiration plus forte et effectuera par conséquent un massage plus intensif.

Nous vous recommandons lors de la première utilisation de positionner le sélecteur sur la position 1. Par la suite, que ce soit au cours de la première séance, ou lorsque votre peau sera habituée au contact de l'appareil, vous pourrez augmenter graduellement le réglage. Si l'opération devient douloureuse, diminuez l'intensité. On obtient les meilleurs résultats lorsque le massage est agréable. Chaque peau étant différente, vous devrez déterminer vous même l'intensité adaptée à votre cas.

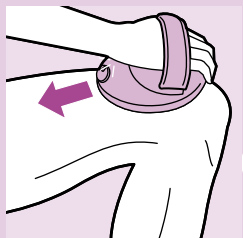

8 Positionnez délicatement l'appareil sur votre peau, légèrement au-dessus du genou. Assurez-vous que le bouton marche/arrêt est dirigé vers la partie supérieure de votre corps.

9 Attendez que le témoin lumineux s'allume sur le devant de l'appareil. Ce témoin indique que Cellesse Vitesse est en contact avec votre peau de façon appropriée et que la séance peut commencer.

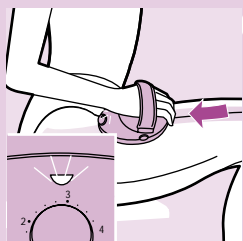

10 Pensez à utiliser toujours l'appareil dans une seule direction, en remontant vers le coeur.

11 Déplacez lentement et graduellement l'appareil du dessus du genou vers le haut de votre cuisse.


Le système de massage Vacumotion va soulever la peau et permettre un massage intensif, efficace et agréable de la couche de cellulite.

12 Laissez votre main suivre le déplacement de l'appareil.

Un mouvement complet partant du dessus du genou jusqu'au haut de la cuisse prend environ cinq secondes.

13 Après avoir fini un mouvement complet, appuyez sur le bouton Vacu-stop. Le témoin lumineux s'éteint et l'action Vacumotion s'interrompt momentanément.

Le système Vacu-stop est particulièrement utile lorsque vous utilisez l'appareil aux niveaux d'intensité plus élevés.

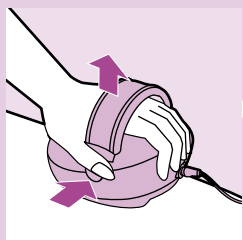




- 14** Retirez l'appareil de votre peau.
- 15** Repositionnez Cellesse Vitesse sur votre peau juste à côté de l'endroit où vous avez procédé à la première opération, et recommencez le même mouvement.
- 16** Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous ayez traité la totalité de la partie extérieure de la cuisse (ne pas utiliser sur l'intérieur de la cuisse) en procédant à une série de mouvements adjacents, en remontant lentement le long de la jambe.
- ▶ Si vous le désirez, vous pouvez appliquer sur la peau une crème, une lotion, du talc ou tout autre produit de soin pour la peau après utilisation de Cellesse Vitesse.
 - ▶ La fréquence idéale pendant les premières semaines est de trois fois par semaine, 7,5 minutes sur chaque jambe. Lisez attentivement le chapitre intitulé "Suivre un programme de soin efficace".

Nettoyage et entretien

L'appareil ne doit jamais être plongé dans l'eau, ni rincé!


- ▶ Pour des résultats optimaux, nettoyez l'appareil après chaque utilisation à l'aide d'un chiffon humide, si besoin est avec une goutte de détergent. Assurez-vous que le filtre de la pompe d'aspiration ne se mouille pas.

N'utilisez ni acétone, ni essence, ni éponges abrasives, ni tampons à recurer, etc. pour nettoyer l'appareil.

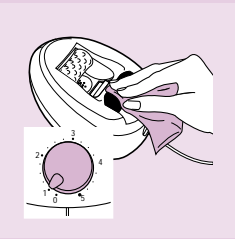

- ▶ Veillez tout particulièrement à bien nettoyer les rouleaux. Sélectionnez le niveau 1 pour mettre en route les rouleaux, et nettoyez-les ensuite avec un chiffon humide comme indiqué sur le schéma.
- ▶ La sangle peut être lavée en machine à laver à max. 40°C. On peut observer un léger changement de couleur de la sangle après lavage. Ceci est normal.

Rangement

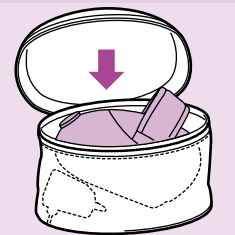

- ▶ Après utilisation, débranchez le transformateur de la prise murale et la fiche d'alimentation de l'appareil et rangez Cellesse Vitesse avec le cordon dans la trousse fournie.

Garantie et service

Pour plus d'informations, visitez notre Philips Web site : www.philips.com ou veuillez contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone dans le dépliant sur la garantie internationale). S'il n'y a aucun Service Consommateurs Philips dans votre pays, contactez votre distributeur ou le Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.