


elettronicamente, l'azione 3-in-1 permette di ottenere un massaggio continuo e delicato.

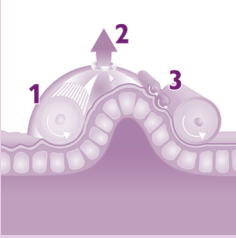

### ► 1. Roll-up

Il rullo anteriore, realizzato in morbido materiale e con piccoli cuscinetti in rilievo, solleva delicatamente la pelle e la guida verso la sezione aspirante.

### ► 2. Aspirazione

Il sistema a vuoto solleva ulteriormente la pelle fino a formare una piega, permettendo all'apparecchio di massaggiare con la massima efficacia lo strato di cellulite.

### ► 3. Massaggio

I quattro rulli, in funzione contemporaneamente, massaggiano in profondità lo strato di cellulite eliminando così i liquidi in eccesso che circondano le cellule adipose, la causa principale della cellulite. I rulli posteriori provvedono poi a rilasciare delicatamente la pelle.



### ► Sensore di controllo e spia

Per rendere ancora più efficace il trattamento, il sistema Vacumotion inizierà ad aspirare solo quando Cellesse Vitesse sarà posizionato in modo corretto a contatto con la pelle. Uno speciale sensore "rileva" la posizione corretta e determina l'accensione di una piccola spia sulla parte anteriore dell'apparecchio per indicare il giusto contatto con la pelle. In questo modo avrete sempre la certezza di utilizzare Cellesse Vitesse in modo corretto.



### ► Impostazione dell'intensità

Grazie allo speciale dispositivo di controllo variabile potete determinare da sole l'intensità del massaggio. Ricordate che il massaggio deve risultare sempre e comunque piacevole. Se avvertite dolore durante il trattamento, riducete gradualmente l'intensità fino a quando il massaggio risulterà piacevole.



### ► Vacumotion Stop

Vacumotion Stop è un modo semplice e sicuro per interrompere o fermare definitivamente, in qualsiasi momento, il trattamento. Premete il pulsante Vacumotion Stop e l'aspirazione si interromperà. Potrete staccare l'apparecchio dalla pelle senza alcuno sforzo.

## Un programma di trattamento efficace per ottenere i migliori risultati.

Consigliamo di usare Cellesse Vitesse tre volte alla settimana, dedicando 7,5 minuti a ciascuna gamba. I test clinici hanno dimostrato che dopo un mese di uso regolare, lo strato di cellulite risulta sostanzialmente ridotto. Ovviamente i risultati possono variare da donna a donna, in base alla gravità della cellulite e allo stile di vita.

Non interrompete il trattamento! Se lo farete, la cellulite comincerà a riformarsi per effetto della naturale tendenza delle donne a trattenere i liquidi in eccesso. Vi consigliamo quindi di usare l'apparecchio tre volte alla settimana per i primi due o tre mesi, per poi passare ad un programma di mantenimento che preveda una seduta settimanale di 15 minuti oppure 3 sedute di 5 minuti alla settimana. Questo programma dovrebbe essere sufficiente per tenere sotto controllo la ritenzione idrica.

### Efficacia dimostrata dai test clinici

Anche se le antiestetiche conseguenze della cellulite sono visibili a livello superficiale, le cause vanno ricercate sotto la pelle. Gli esperti dell'Università di Bruxelles hanno condotto due tipi di test clinici per provare l'efficacia del sistema Vacuumotion™ 3-in-1.

- Il primo test ha dimostrato che utilizzando il sistema Vacuumotion™ 3-in-1 soltanto 3 volte alla settimana, lo strato di cellulite si riduce fino al 49% dopo un solo mese.

Questi test hanno utilizzato le scansioni ad ultrasuoni per misurare il livello di gonfiore dello strato di cellulite - la causa della cellulite.

I risultati ottenuti dalle donne che hanno usato Cellesse Vitesse sono stati confrontati con quelli ottenuti da un gruppo campione che non ha usato l'apparecchio.

### Efficacia dimostrata nel ridurre visibilmente la cellulite


Ulteriori test hanno dimostrato che Cellesse è efficace anche sulla superficie esterna della pelle perchè rende la pelle visibilmente più liscia.

Per i test condotti presso l'Università di Bruxelles è stata utilizzata una tecnica conosciuta come topografia a proiezione che utilizza un sistema computerizzato per visualizzare la superficie della pelle e misurare la riduzione della cellulite.

### LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO

Non usate Cellesse Vitesse nel caso di pelle ipersensibile, problemi di pelle o irritazioni, vene varicose, cicatrici, macchie o ferite. Le donne in gravidanza o con problemi cardiaci, di circolazione o diabete dovrebbero sempre consultare il medico prima di usare Cellesse Vitesse.

Utilizzate l'apparecchio esclusivamente per massaggiare la parte esterna di fianchi, cosce e glutei. Non utilizzatelo su altre parti del corpo!

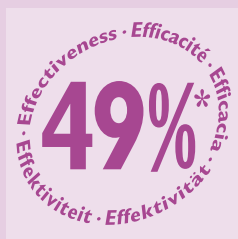

## Effetti collaterali durante e dopo il trattamento

Dopo aver usato Cellesse Vitesse, la pelle potrà apparire leggermente arrossata e disidratata. Non preoccupatevi: è un fenomeno del tutto normale dopo un massaggio, determinato dalla riattivazione della circolazione sanguigna, destinato a scomparire in breve tempo. Se necessario, dopo un trattamento con Cellesse Vitesse potete applicare una crema idratante o una lozione per il corpo per idratare la pelle. Nel caso l'arrossamento persista per oltre 24 ore o nel caso di reazioni anomale, sospendete l'uso dell'apparecchio e consultate un medico.


A chi è particolarmente soggetta a lividi o presenta venuzze superficiali, consigliamo di utilizzare con estrema attenzione le regolazioni più alte, soprattutto durante le prime settimane. All'occorrenza, premete il tasto Vacuumotion Stop per staccare immediatamente l'apparecchio dalla pelle.

Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare l'apparecchio come indicato nelle pagine seguenti.


## Importante

- ▶ Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, leggete attentamente il capitolo "Leggere attentamente prima dell'uso".
- ▶ L'apparecchio è adatto solo per uso domestico.
- ▶ Prima di collegare l'apparecchio, controllate che la tensione indicata sulla spina corrisponda a quella della rete locale.
- ▶ Utilizzate l'apparecchio soltanto con il cavo di alimentazione fornito.
- ▶ Non usate l'apparecchio sulla pelle umida.
- ▶ L'apparecchio è stato realizzato per il trattamento di fianchi, cosce e glutei. Non usate l'apparecchio sulle braccia, sull'interno cosce, sulla pancia o sul seno.
- ▶ Tenete l'apparecchio lontano dall'acqua!
- ▶ Tenete l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- ▶ Una pulizia regolare garantisce risultati ottimali e una maggior durata dell'apparecchio.
- ▶ Nel caso in cui il cavo di alimentazione dovesse essere danneggiato, dovrà essere sostituito esclusivamente con un cavo originale Philips. Rivolgetevi al rivenditore Philips o al Centro Assistenza Philips del vostro paese per la sostituzione.


## Come preparare Cellesse Vitesse

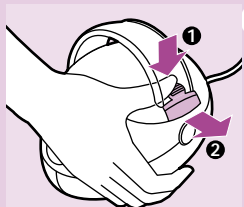


- 1 È possibile adattare la cinghietta alle dimensioni della vostra mano. Premete con il pollice il pulsante all'interno della cinghietta ed estraete la fibbia dall'apparecchio.

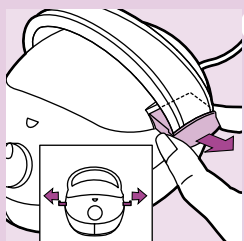

- 2 Estraete l'estremità della cinghietta e togliete il perno dalle fessure.

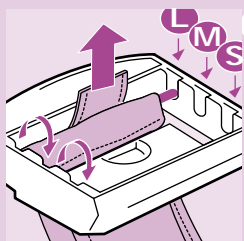


- 3 Premete il perno in una delle altre fessure. Sono possibili tre misure: L per le mani grandi, M, per mani di dimensioni normali e S per le mani piccole.

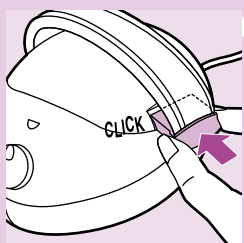

- 4 Rimettete a posto la fibbia fino a quando risulta ben fissata. Potete fare lo stesso con l'altra estremità della cinghietta per stringerla o allentarla ulteriormente. In questo modo potete adattare la cinghietta alle dimensioni della mano.


## Come usare Cellesse Vitesse

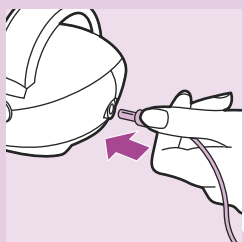

- 1 Controllate che la pelle sia asciutta, pulita e priva di sostanze grasse o altri prodotti cosmetici.

Non applicate creme o lozioni sulla pelle prima di effettuare il massaggio.


- 2 Fate attenzione che i rulli non possano afferrare vestiti o ciocche di capelli durante l'uso. Legate i capelli prima di iniziare il trattamento.
- 3 Inserite lo spinotto nell'apparecchio.

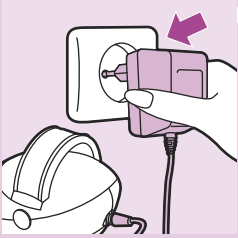

**4** Infilate la spina del trasformatore nella presa di corrente.

**5** Infilate la mano sotto la cinghietta e afferrate Cellesse Viteses con l'intera mano (la punta delle dita deve essere rivolta verso la presa per lo spinotto).


**6** Potete usare Cellesse Vitesse stando sedute, in piedi oppure sdraiate.

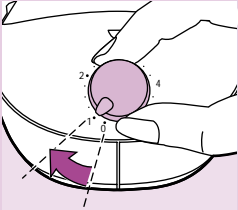


**7** Prima di iniziare il trattamento, impostate l'intensità desiderata con l'interruttore on/off.

I livelli più alti forniscono una maggiore potenza di aspirazione e quindi un massaggio più intenso.

Vi consigliamo di iniziare il primo trattamento con il livello 1. Durante il massaggio o non appena la pelle si sarà abituata al trattamento, potrete aumentare gradualmente l'intensità. Nel caso il massaggio risultasse doloroso, diminuite l'intensità, ricordando che i migliori risultati si ottengono quando il trattamento risulta anche piacevole. Nel giro di pochissimo tempo scoprirete facilmente qual è l'intensità più adatta al vostro particolare tipo di pelle.

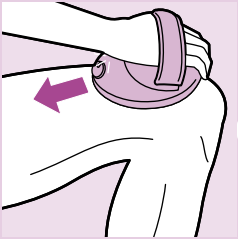

**8** Appoggiate delicatamente l'apparecchio sulla pelle, appena sopra il ginocchio. Controllate che l'interruttore on/off sia rivolto verso la parte superiore del corpo.

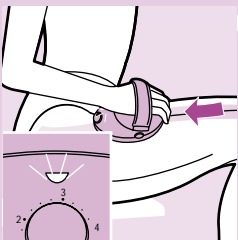


**9** Aspettate fino a quando si accende la spia posta sulla parte anteriore dell'apparecchio. È il segnale che Cellesse Vitesse è stato posizionato correttamente a contatto della pelle ed è quindi pronto per l'uso.

**10** Muovete l'apparecchio sempre e solo in una direzione, risalendo lungo la gamba in direzione del cuore.


**11** Muovete l'apparecchio lentamente e gradualmente partendo dal ginocchio e risalendo verso la parte superiore della coscia. Il sistema di massaggio Vacuumotion solleva la pelle e massaggerà in profondità ed efficacemente lo strato di cellulite.

**12** Lasciate che la mano segua il movimento dell'apparecchio. Un movimento completo dal ginocchio alla parte superiore della coscia dovrebbe durare circa 5 secondi.

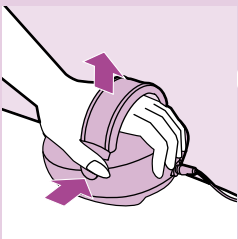

**13** Terminato un movimento, premete il pulsante Vacuumotion Stop. Si spegnerà la spia per indicare la momentanea interruzione dell'azione Vacuumotion.

Il sistema Vacuumotion Stop è particolarmente pratico quando l'apparecchio viene utilizzato alle intensità più elevate.

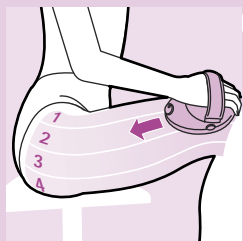


- 14** Sollevate l'apparecchio dalla pelle.
- 15** Rimettete Cellesse Vitesse sulla pelle, vicino alla posizione di partenza della prima passata, e ricominciate il massaggio.
- 16** Ripetete questa operazione fino a quando avrete trattato l'intera coscia, ad eccezione della parte interna, con una serie di massaggi lenti, lunghi e adiacenti.
- ▶ Se lo desiderate, al termine del trattamento con Cellesse Vitesse potete applicare una crema, una lozione, del borotalco o un altro tipo di prodotto cosmetico.
  - ▶ La frequenza raccomandata per i primi mesi è di tre volte alla settimana, dedicando 7,5 minuti a ciascuna gamba. A tale proposito, leggete il capitolo "Un programma di trattamento efficace per ottenere i migliori risultati".

## Pulizia e manutenzione

Non immergete mai l'apparecchio in acqua e non risciacquatelo!

- ▶ Per ottenere risultati ottimali, pulite l'apparecchio al termine di ciascun trattamento con un panno umido aggiungendo, se necessario, un po' di detersivo. Fate attenzione a non bagnare il filtro della pompa di aspirazione!


Non usate alcool, acetone, benzina, sostanze abrasive ecc. per pulire l'apparecchio.

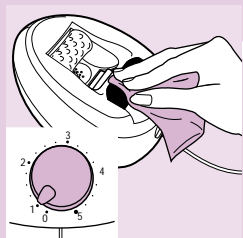

- ▶ Quando pulite l'apparecchio, prestate la massima attenzione ai rulli. Impostate l'intensità 1 per mettere in funzione i rulli, poi puliteli con un panno umido, come indicato.
- ▶ La cinghietta può essere lavata in lavatrice alla temperatura massima di 40°C.

Dopo ripetuti lavaggi, il colore della cinghietta potrebbe sbiadire leggermente.

## Come riporre l'apparecchio

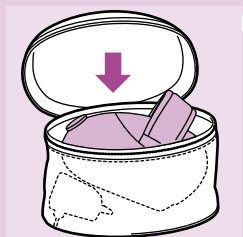

- ▶ Dopo l'uso, togliete la spina del trasformatore dalla presa di corrente e lo spinotto dall'apparecchio e riponete Cellesse Vitesse e il relativo cavo nell'apposita custodia.

## Garanzia e Assistenza

Se avete bisogno di assistenza o di ulteriori informazioni, vi preghiamo di visitare il nostro sito web: [www.Philips.com](http://www.Philips.com) oppure di contattare il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro Paese (per conoscere il numero di telefono, vedere l'opuscolo della garanzia). Qualora nel vostro Paese non ci fosse un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al rivenditore autorizzato Philips oppure contattate il Service Departmente of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.