

SALON LASER

HAIR REMOVAL SYSTEM



Wellenlänge
808nm

Das Tragen einer Laserschutzbrille ist nicht erforderlich, denn das Produkt ist mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet.



PATENTE ANHÄNGIG



PRODUKT DER KLASSE 1
MIT EINEM LASER DER
KLASSE 3B

1-IN-LAHR2-G/1.0

!
Dieses Produkt **MUSS** mit großer Sorgfalt angewendet werden.
Bitte lesen Sie vor der Anwendung die **GESAMTE** Gebrauchsanweisung, einschließlich Benutzerhandbuch, **AUFMERKSAME** durch.

F Folgende Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch:

- REIHENFOLGE FÜR DAS DRUCKEN DER SICHERHEITSTASTEN
- INFORMATIONEN ÜBER HAARE, LASER, HAUTTYPEN UND BEHANDLUNGEN

GEBRAUCHSANLEITUNG

WARNHINWEISE

Nicht geeignet für afro-karibische oder schwarze Hauttypen. Siehe "Geignete Hauttypen" im Benutzerhandbuch.

Die Entfernung von Haaren mit dem Laser sollte keine Schmerzen oder Beschwerden verursachen. Wenn Schmerzen auftreten, ist möglicherweise die Einstellung zu hoch oder das Produkt ist für Ihre Hautfarbe ungeeignet.

Die in das Produkt integrierten Sicherheitsfunktionen schützen zwar die Augen vor einem Kontakt mit dem Laser, aber der Handstab darf niemals auf die Augen oder in die Nähe der Augen gerichtet werden!

Verwenden Sie das Gerät **NICHT** in der Nähe brennbarer Materialien.

Bewahren Sie das Produkt außer Reich- und Sichtweite von Kindern und Haustieren auf.

Gefahr einer Ablenkung des Laserstrahls: Entfernen Sie vor der Behandlung bitte allen Schmuck in der Nähe des zu behandelnden Bereichs.

Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, bewahren Sie den Schlüssel an einem sicheren Ort auf, wo er für Kinder unzugänglich ist.

Behandeln Sie die Haare an einer Körperstelle in einer Sitzung nicht mehrmals.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Alkohol getrunken haben oder wenn Sie sich unwohl fühlen oder müde sind.

Behandeln Sie folgende Stellen nicht mit dem Laser: Tätowierungen, Hautstellen mit permanentem Make-up, Pickel, Warzen, Haare auf pigmentierten Hautflecken oder Muttermalen, Sommersprossen, erkrankte Hautstellen, Muttermale, Verbrennungen, Lippen, Brustwarzen, Genital- oder Analbereich, Ekzeme, Wimpern, Augenbraun, Augenbereich, Haare in Nase oder Ohren.

VORSICHTSMAßNAHMEN



Zerlegen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie auch nicht, es zu reparieren. Wenn Sie Probleme mit der Anwendung dieses Produktes haben, wenden Sie sich an unsere Kundendienstabteilung.

Eine missbräuchliche Anwendung des Gerätes und seiner Komponenten kann zum Austritt gesundheitsgefährdender Strahlung führen.

Die Sicherheitsfunktionen des Gerätes dürfen **NICHT** außer Kraft gesetzt und das Gerät darf **NICHT** geöffnet werden.

Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzadapter.

BESTANDTEILE

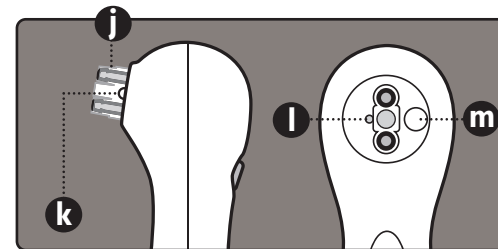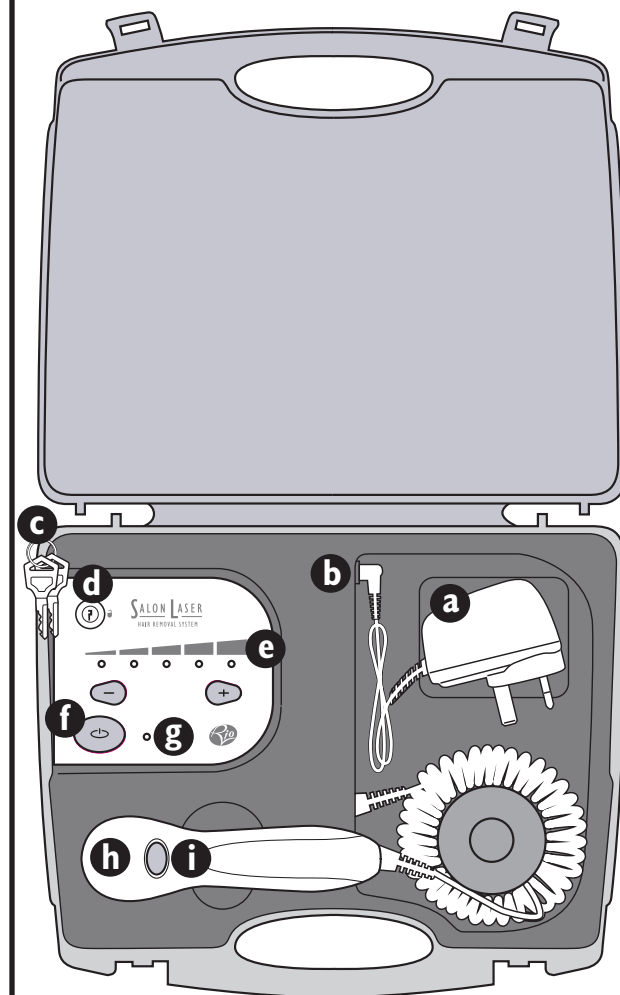

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| a. Netzadapter | h. Handstab |
| b. Netzanschlussbuchse | i. Laserbetriebstaste |
| c. Schlüssel | j. Laserschutz und Berührungsstifte |
| d. Schlüsselschalter | k. Laseröffnung |
| e. Leistungspegel (5 grüne Leuchten) | l. Weiße 'Bereitschafts'-Leuchte |
| f. Einschalt-/Halte-Taste | m. Gelbe Leuchte |
| g. Einschalt-/Halte-Leuchte (rot) | |

HAUTTEST


WICHTIG: Es ist sehr wichtig, dass Sie 24 Stunden vor der Behandlung einen Hauttest machen.

Mit dem Hauttest können Sie die höchste Leistungseinstellung für Ihren Hauttyp ermitteln. Jeder zu behandelnde Hautbereich muss geprüft werden, da einzelne Körperbereiche hinsichtlich der Hautfarbe unterschiedlich sein können.



Siehe Abschnitt 'HAUTTEST' im Benutzerhandbuch.

BEHANDLUNG

- Die besten Ergebnisse erzielt man bei Haaren, die ein oder zwei Tage vor der Behandlung auf eine Länge von 1-2 mm abrasiert oder gekürzt wurden.
- Entfernen Sie allen Schmuck aus dem zu behandelnden Bereich.
- Achten Sie unbedingt darauf, in dem zu behandelnden Hautbereich 24 Stunden vor der Behandlung einen Hauttest zu machen.

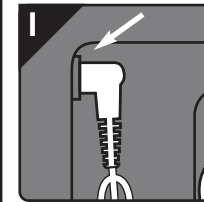


Stecken Sie den Netzadapter in die entsprechende Buchse am Gerät und das Kabel in die Wandsteckdose.

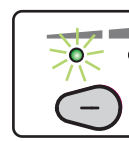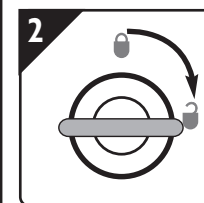

Entriegeln Sie den Schlüsselschalter mithilfe des Schlüssels.


Die linke Leuchte der Leistungsanzeige blinkt grün.

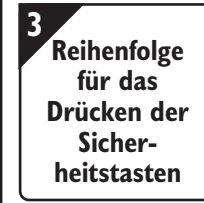

3 Reihenfolge für das Drücken der Sicherheitstasten

Nun müssen Sie innerhalb von 60 Sekunden die "REIHENFOLGE FÜR DAS DRUCKEN DER SICHERHEITSTASTEN" eingeben.



Den entsprechenden Code finden Sie vorne im Benutzerhandbuch.

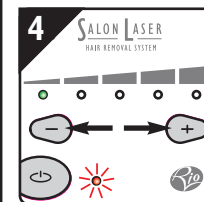


Verwenden Sie die Tasten + und - zur Einstellung des Leistungsniveaus. Die Hauttypen sind dem Benutzerhandbuch zu entnehmen.

! Wenn die Behandlung schmerzhaft ist, reduzieren Sie die Leistungseinstellung.

Wenn die Leistungsstärke eingestellt ist, blinkt die rote Einschalt-/Halte-Leuchte.

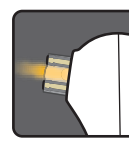
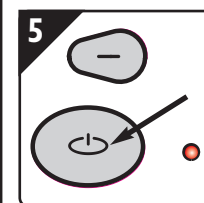


Drücken Sie die Einschalt-/Halte-Taste. Die rote Bereitschaftsleuchte bleibt an und die gelbe Leuchte am Stab leuchtet auf.

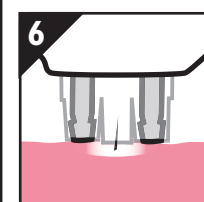

Bei der Platzierung auf der Haut geht die gelbe Leuchte AUS und die weiße Bereitschaftsleuchte leuchtet auf.

BEHANDLUNG

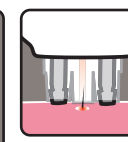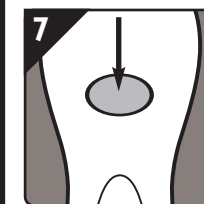

Um die Behandlung zu beginnen, drücken Sie die Lasertaste und HALTEN diese Taste gedrückt. Sie hören eine Reihe von hohen Pieptönen, die anzeigen, dass der Laser in Betrieb ist. Der Laser ist als kleines rotes Licht zu sehen.

Der Laser muss auf die HAARWURZEL gerichtet werden.




Bei den niedrigeren Leistungseinstellungen schaltet der Laser im Vier-Sekunden-Takt ein und aus.



Während der Behandlung spüren Sie unter Umständen etwas wie Nadelstiche, aber die meisten Menschen spüren die Behandlung überhaupt nicht.



Während der Laserenthaarung kann es manchmal leicht nach verbrannter Haut riechen oder es wird ein wenig Rauch sichtbar.

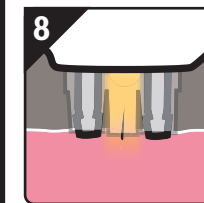


Wenn die rote Laserbehandlungsleuchte ausgeht, leuchtet die gelbe Leuchte wieder auf. Nun können Sie das nächste Haar behandeln.



Zwischen den einzelnen Behandlungen müssen die Berührungsstifte kurz von der Haut entfernt werden.



Erfolgreich behandelte Haare fallen innerhalb **weniger Tage** aus (Sie können dies durch Reiben der Haut beschleunigen).

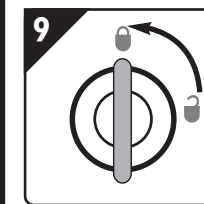

Wenn Sie mit der Behandlung fertig sind, verschließen Sie das Gerät wieder mit dem Schlüsselschalter. Bewahren Sie den Schlüssel an einem sicheren Ort auf, wo er für Kinder unzugänglich ist.



Werden innerhalb von 60 Sekunden keine Tasten betätigt, wird der Laser deaktiviert. Kehren Sie zu Schritt Nr. 4 zurück und setzen Sie die Behandlung fort.

Nach 20 Minuten schaltet das Gerät komplett aus. Zum Wiedereinschalten drehen Sie den Schlüssel in die Aus-Stellung und dann wieder in die An-Stellung zurück und beginnen bei Schritt Nr. 3.

Sollten bei der Bedienung unerwartete Störungen auftreten, können externe elektromagnetische Störfaktoren die Ursache sein. In diesem Fall sollten sie diese entfernen und das Gerät neu starten. Es besteht zu keinerzeit Gefahr, dass sich der Laser durch derartige Quellen von alleine in Betrieb setzt.