

SALON LASER

HAIR REMOVAL SYSTEM



Il est **IMPÉRATIF** d'utiliser ce produit de manière responsable.

Prière de lire **ATTENTIVEMENT** **TOUTES** les consignes, y compris le mode d'emploi, avant utilisation.



Reportez-vous à votre mode d'emploi pour :

- LE CODE DE BOUTON DE SÉCURITÉ
- DES RENSEIGNEMENTS SUR LES TYPES DE POIL, DE LASER ET DE PEAU, AINSI QUE LES TRAITEMENTS

MODE D'EMPLOI

Veuillez conserver ces instructions afin de pouvoir vous y référer à l'avenir.



Longueur d'onde de 808 nm

Le port de lunettes de sécurité n'est pas nécessaire. En effet, le produit comporte des dispositifs de sécurité intégrés.



EN INSTANCE DE BREVETS



PRODUIT DE CLASSE 1 CONTENANT UN LASER DE CLASSE 3B

1-IN-LAHR2-FD/1.0

NOTICE D'AVERTISSEMENT

Ne convient pas aux couleurs de peau afro-antillaises ou noires. Voir "Types de peau adaptés" dans le mode d'emploi.

L'épilation au laser n'est pas censée causer de gêne. Si vous ressentez une gêne ou une douleur, il se peut que le réglage soit trop élevé ou que ce produit ne soit pas adapté à votre teint (couleur de la peau).

Si l'irritation persiste, consultez votre médecin.

Les dispositifs de sécurité intégrés protègent les yeux contre toute exposition au rayon laser. Toutefois, ne tenez jamais la tige portable en direction des yeux ou à proximité.

N'utilisez PAS l'appareil à proximité de matériaux inflammables. Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Danger de réflexion : veuillez retirer tous les bijoux qui se trouvent à proximité de la zone à traiter avant de commencer le traitement. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, rangez la clé dans un endroit sûr, à l'écart des enfants.

Ne traitez pas les mêmes poils de manière répétée pendant une même séance.

N'utilisez pas l'appareil après avoir consommé de l'alcool ou si vous ne vous sentez pas bien ou vous sentez fatigué.

Ne traitez pas les zones de peau suivantes : tatouages, maquillage permanent, fessettes, verrues, poil poussant sur des points noirs ou des grains de beauté, taches de rousseur foncées, zones atteintes d'une maladie de la peau, taches de naissance, brûlures, lèvres, mamelons, parties génitales ou anales, zones atteintes d'eczéma, cils, sourcils, contour des yeux, poils du nez ou des oreilles.



PRÉCAUTIONS À PRENDRE

Ne démontez PAS l'appareil et ne tentez pas de le réparer. En cas de difficultés d'utilisation, contactez le service clientèle.

Tout usage abusif de l'appareil peut entraîner des blessures. Ne contournez PAS les fonctions de sécurité et n'ouvrez pas l'appareil ou la tige portable.

Utilisez cet appareil exclusivement avec l'adaptateur secteur fourni.

COMPOSANTS

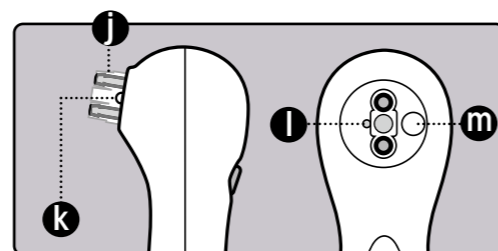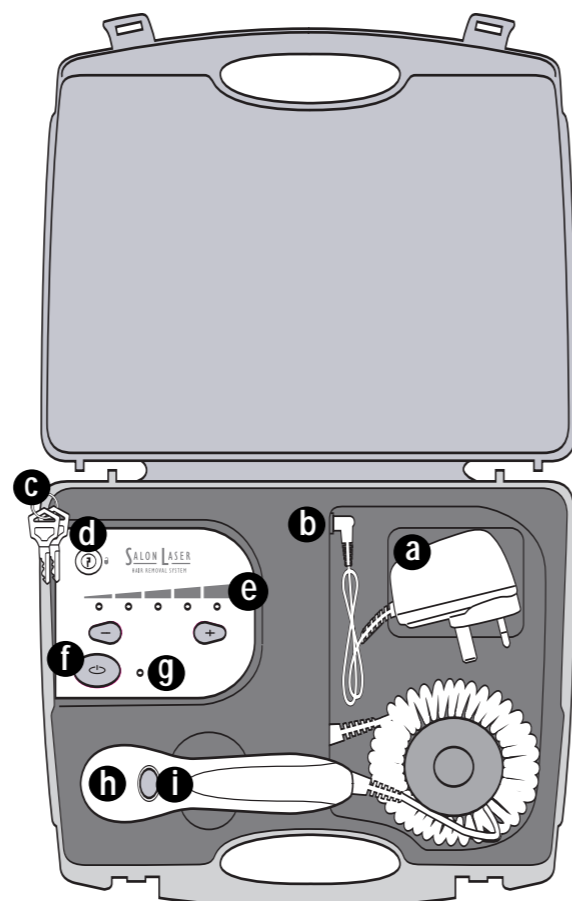

- | | |
|--|---|
| a. Adaptateur secteur | h. Tige portable |
| b. Prise électrique | i. Bouton du laser |
| c. Clés | j. Gaine de laser et broches de contact |
| d. Interrupteur à clé | k. Ouverture du laser |
| e. Niveau de puissance (5 voyants verts) | l. Voyant blanc "prêt" |
| f. Bouton d'activation | m. Voyant orange |
| g. Voyant d'activation (rouge) | |

TEST PAR APPLICATION LOCALE


IMPORTANT : il est important de procéder à un test par application locale 24 heures avant le traitement.

Ce test confirmera le niveau de puissance maximal à utiliser en fonction de votre type de peau. Chaque partie à traiter doit être vérifiée, car la couleur de la peau peut varier.


Veuillez vous reporter à la rubrique "TEST PAR APPLICATION" du mode d'emploi pour connaître la démarche à suivre.

TRAITEMENT


- Les meilleurs résultats sont obtenus sur des poils qui ont été rasés un jour ou deux avant le traitement ou coupés pour obtenir une longueur comprise entre 1 et 2 mm.
- Retirez tous les bijoux qui se trouvent à proximité de la zone à traiter.
- Veillez à bien procéder à un test par application locale sur la zone à traiter 24 heures avant le traitement.

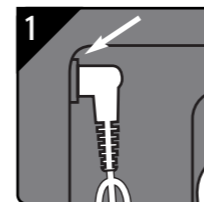


Branchez l'adaptateur secteur sur l'appareil et sur la prise secteur.

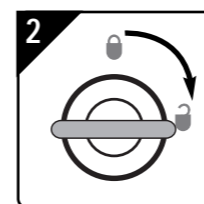

A l'aide de la clé, déverrouillez l'interrupteur à clé. Le voyant du niveau de puissance situé à gauche commence à clignoter (vert).

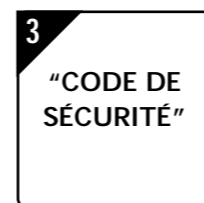


Entrez le CODE DE SÉCURITÉ avant la fin du délai de 60 secondes. Vous trouverez le code de sécurité dans le mode d'emploi. Veillez à bien lire le mode d'emploi avant de procéder au traitement.

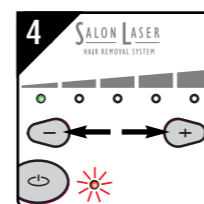


Utilisez les boutons + et - pour définir le niveau de puissance. Reportez-vous au mode d'emploi pour connaître les différents types de peau.

⚠ En cas de sensations de gêne, réduisez le niveau de puissance.

Lorsque le niveau de puissance est réglé, le voyant d'activation rouge commence à clignoter.


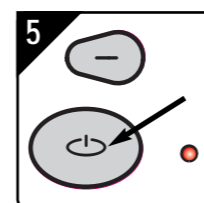


Appuyez sur le bouton d'activation. Le voyant d'activation rouge reste allumé et le voyant orange de la tige portable s'allume.

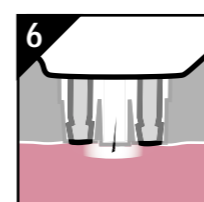

Une fois la tige posée sur la peau, le voyant orange s'éteint et le voyant blanc "prêt" s'allume.

TRAITEMENT

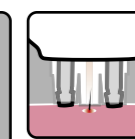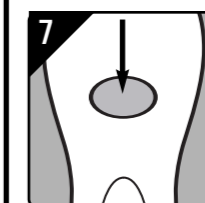

Maintenez le bouton du laser enfoncé pour commencer le traitement au laser rouge. Une série de bips aigus se fait entendre pour indiquer que le laser fonctionne. Le laser apparaît sous forme de petite lumière rouge.

Cette lumière doit être dirigée vers la RACINE du poil.




Pour les niveaux d'intensité inférieurs, le laser s'allume et s'éteint par impulsions pendant 4 secondes.



Il est possible que vous ressentiez des petites piqûres pendant le traitement. Toutefois, la plupart des utilisateurs ne sentent rien.



Il est parfois possible de sentir de légères odeurs de brûlé, voire même d'apercevoir une volute de fumée se dégager du poil au moment de son traitement.

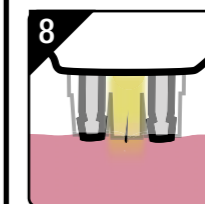


Lorsque la lumière laser rouge et les bips sonores s'arrêtent, le voyant orange s'allume à nouveau. Vous pouvez alors passer au poil suivant.



Les broches de contact doivent être brièvement éloignées de la peau entre chaque poil traité.



Les poils traités avec succès tombent au bout de 7 à 10 jours (un frottement léger encouragera la chute des poils).

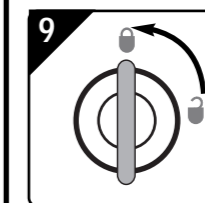

Après utilisation, tournez l'interrupteur à clé pour verrouiller l'appareil. Enlevez la clé et rangez-la dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.



Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 60 secondes, le laser se désactive. Retournez à l'étape 4 pour poursuivre le traitement.

L'appareil s'éteint complètement au bout de 20 minutes. Pour l'allumer à nouveau, tournez la clé vers la position d'arrêt (Off), puis de nouveau vers la position de marche (On) et reprenez à l'étape 3.

Lorsque l'appareil se comporte de manière inattendue, il est possible que des interférences électromagnétiques externes en soient la cause. Vous devez éliminer cette source d'interférences et remettre l'appareil en marche afin qu'il fonctionne à nouveau correctement. Le laser ne sera à aucun moment émis involontairement.

SALON LASER

HAIR REMOVAL SYSTEM



Golflengte van 808 nm

Het is niet nodig om een veiligheidsbril te dragen, omdat dit product ingebouwde veiligheidsfuncties heeft.



OCTROOI AANGEVRAAGD



PRODUCT VAN CATEGORIE 1 MET EEN CATEGORIE 3B LASER

Dit product **MOET** op verantwoorde wijze worden gebruikt.

Lees **ALLE** aanwijzingen, inclusief de handleiding **GOED** door, voordat u dit product gaat gebruiken.

Lees de aanwijzingen in de handleiding voor:

- VEILIGHEIDSKNOP CODE
- INFORMATIE OVER HAAR, LASER, HUIDTYPES EN BEHANDELINGEN

INSTRUCTIONS

Please retain this instruction leaflet for future reference

WAARSCHUWINGEN

Niet geschikt voor zwarte huidtypes. Zie "Geschikte huidtypes" in de handleiding.

Ontharing met laserstralen doet geen pijn. Als u pijn voelt of als de huid gevoelig blijft, dan kan het zijn dat de instelling te hoog is of dat uw huidtype (kleur) ongeschikt is voor dit product.

De ingebouwde veiligheidsfuncties beschermen de ogen tegen de laserstraal. Toch mag u het peninstrument nooit op de ogen richten.

NOOIT in de buurt van brandbaar materiaal gebruiken.

Dit product uit de buurt van kinderen en huisdieren houden.

Reflectiegevaar: Verwijder vóór elk gebruik alle juwelen uit het te behandelen gebied.

Wanneer de sleutel niet wordt gebruikt, bergt u hem goed op, uit de buurt van kinderen.

Nooit hetzelfde haartje meerdere keren gedurende één sessie behandelen.

Niet gebruiken wanneer u alcohol hebt gebruikt, of als u zich niet lekker of moe voelt.

Niet gebruiken rond: tatoeages, permanente make-up, puistjes, wratten, haren op zwarte vlekken of kleine moedervlekken, donkere sproeten, huidaandoeningen, opstaande moedervlekken, verbrande huid, lippen, tepels, genitaliën, anus, eczeem, oogharen, wenkbrauwen, rond ogen, neus- of oorhaartjes.



OPPASSEN

Het toestel **NOOIT** uit elkaar halen of repareren. Als u problemen ondervindt met het product, neem dan contact op met onze klantenservice.

Als het toestel wordt misbruikt, kan dit lichamelijk letsel veroorzaken.

NOOIT enige veiligheidsfunctie opheffen of het toestel openen. Gebruik dit product alleen met de meegeleverde netstroomadapter.

ONDERDELEN

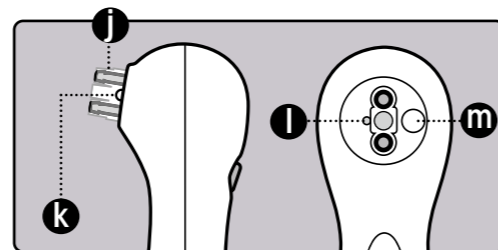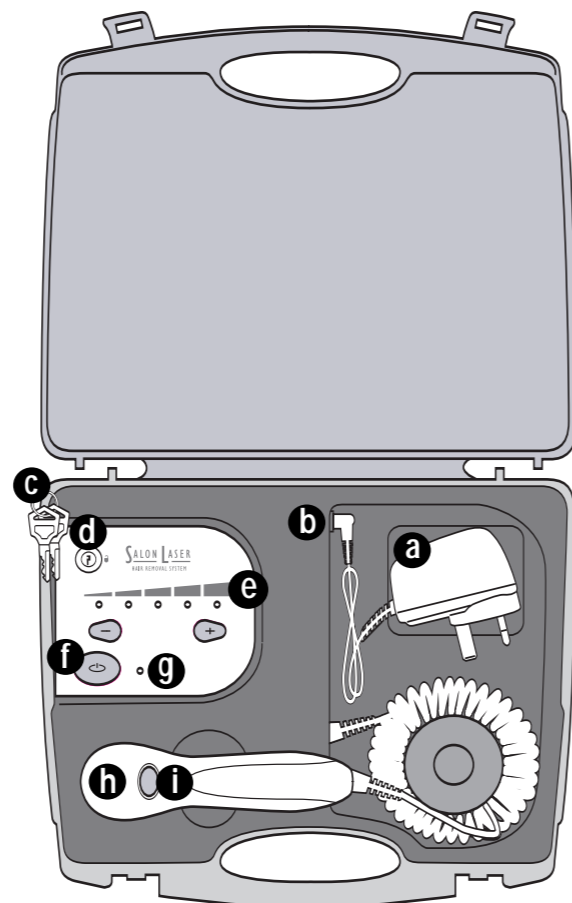

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| a. Netstroomadapter | h. Handheld peninstrument |
| b. Stroomcontact | i. Laserknop |
| c. Sleutels | j. Laserversterking en aanraakpennen |
| d. Sleutelschakelaar | k. Laseropening |
| e. Stroomstand (5 groene lichtjes) | l. Wit 'klaar' lichtje |
| f. Activeringsknop | m. Oranje lichtje |
| g. Activeringslichtje (rood) | |

TESTEN


BELANGRIJK: 24 uur vóór de behandeling is het erg belangrijk om de werking van het toestel te testen.

Deze test bepaalt de maximale stroomstand die geschikt is voor uw huidtype. Elk te behandelen huidgedeelte moet getest worden, omdat de huidtint vaak varieert.


Lees het deel 'TESTEN' in de handleiding, waar alle aanwijzingen staan.

BEHANDELING

- Het beste resultaat wordt bereikt bij haartjes die een dag of twee vóór de behandeling zijn geschoren of afgeknipt tot 1-2 mm lengte.
- Verwijder vóór elk gebruik alle juwelen uit het te behandelen gebied.
- Zorg dat u de te behandelen huid 24 uur vóór de behandeling hebt getest.

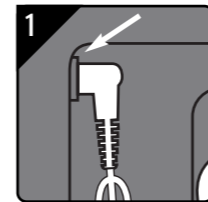


Steek het snoerstekkertje in het toestel en de stroomstekker in het stopcontact.

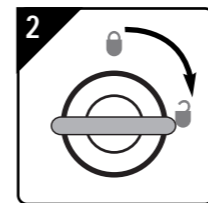

Gebruik de sleutel om de sleutelschakelaar te ontgrendelen.


Het linker stroomindicatielichtje begint groen te knipperen.

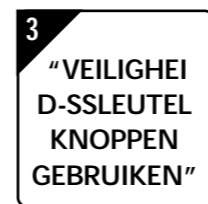

"VEILIGHEIDSSLEUTEL KNOPPEN GEBRUIKEN"

Voer binnen 60 seconden de 'VEILIGHEIDSSLEUTEL KNOPPEN GEBRUIKEN' in.


De Veiligheidssleutel - knoppen gebruiken staat voorin de handleiding.

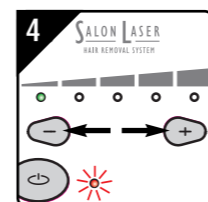


Gebruik de + en - knoppen om de stroomsterkte in te stellen. Raadpleeg de handleiding voor de verschillende huidtypen.

Als u pijn voelt, zet u de stroomstand lager.

Wanneer de stroomstand wordt gewijzigd, knippert het rode activeringslichtje.


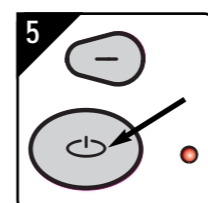


Druk op de activeringsknop. Het rode activeringslichtje blijft aan en het oranje lichtje op het peninstrument gaat branden.

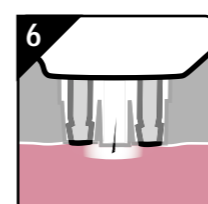

Wanneer u dit op de huid plaatst, gaat het oranje lichtje **UIT** en gaat het witte 'gereed'-lichtje branden.

BEHANDELING

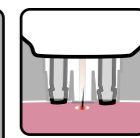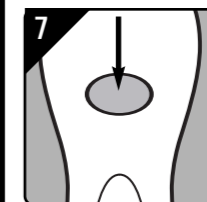

Houd de laserknop ingedrukt om de behandeling te beginnen. U hoort een aantal hoge piepjes die aangeven dat de laser functioneert. U ziet een klein rood stipje.

De laserstraal moet op de WORTEL van het haartje gericht zijn.




Op de lagere standen zal de laser 4 seconden lang aan en uit pulseren.



Het is mogelijk dat u een 'speldenprik' tijdens de behandeling voelt, maar de meeste mensen voelen helemaal niets.



Soms ruikt u een lichte brandlucht of ziet u zelfs een klein lijntje rook opstijgen wanneer het haartje wordt behandeld.

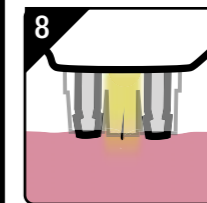


Wanneer het rode laserlichtje ophouden, gaat het oranje lichtje weer aan. U kunt nu met het volgende haartje doorgaan.



De aanraakpennen moeten even van de huid af gehaald worden, voordat het volgende haartje wordt behandeld.



De met succes behandelde haartjes vallen binnen een paar dagen uit (als u zacht over de huid wrijft, dan gebeurt dit sneller).

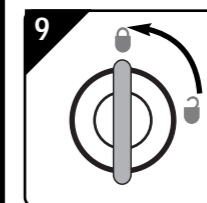

Na elk gebruik draait u het toestel met de sleutelschakelaar op slot. Verwijder de sleutel en bewaar hem uit de buurt van kinderen.



Als er 60 seconden lang geen knop wordt ingedrukt, schakelt de laser uit. Ga terug naar Stap 4 om de behandeling voort te zetten.

Na 20 minuten schakelt het toestel automatisch helemaal uit. Als u opnieuw wilt beginnen, draait u de sleutel helemaal naar uit en weer naar aan. Ga verder vanaf Stap 3.

Als u merkt dat dit product op onverwachte wijze functioneert, dan kan dat komen door enige elektromagnetische storing. U moet deze storingsbron verwijderen en het product opnieuw starten, voordat u de behandeling hervat. De laserstraal zal nooit per ongeluk aan gaan.